

FAVORIT PLUS

postřik dezinfekce povrchy



Rychlá alkoholová dezinfekce



Varianta	Jednotlivé balení	Přepravní balení	REF
neutral	kanystr 10 litrů	2 x 10 litrů	REF 32001
fleur	kanystr 10 litrů	2 x 10 litrů	REF 32002
melone	kanystr 10 litrů	2 x 10 litrů	REF 32003

- Roztok k přímému použití pro dezinfekci povrchů odolných vůči alkoholu
- Široké spektrum účinnosti a dobré čisticí vlastnosti
- Mimořádně šetrný: inovativní složení nedráždí dýchací cesty
- Velmi dobrá snášenlivost s povrchy odolnými vůči alkoholu
- Rychle se odpařuje a nezanechává zbytky
- Vhodný také k napouštění rolí utěrek z netkané textilie
- Schválen jako biocid i zdravotnický prostředek (dvojitý použití)

Ověřená, spolehlivá účinnost

Zařazen v seznamu VAH, široké spektrum účinnosti včetně bakterií, virů, plísní a TBC.

Šetrný k lidem i materiálům

Vysoká materiálová snášenlivost, bezpečné kombinace účinných látek, šetrný k pokožce a klinicky ověřený.

Pohodlné použití

Snadná aplikace, jednoduché dávkování, praktické velikosti balení a vysoká hospodárnost.

Účinný a rychlý

Krátké doby působení, zasychá beze zbytků.

Použití

Podle MPG: Dezinfekční přípravek k přímému použití otěrem pro preventivní dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků odolných vůči alkoholu (není vhodný pro konečné zpracování invazivních zdravotnických prostředků).

Podle nařízení o biocidních přípravcích: Rychlá alkoholová dezinfekce k přímému použití pro malé plochy odolné vůči alkoholu. BAuA: reg. č. N-72764.

Spektrum účinnosti

Baktericidní (včetně MRSA), levurocidní (Candida albicans), tuberkulocidní (M. terrae), omezeně virucidní PLUS (obalené viry, např. HBV, HIV, HCV, koronaviry a viry chřipky, i neobalené adenoviry, rotaviry a noroviry).



Vyrobeno v Německu: odpovědná a udržitelná výroba.



Praktická velikost balení šetří obalový materiál, náklady na dopravu i zdroje.

Doby působení


Ve zdravotnictví

Bakterie (EN 13727, EN 16615, VAH, vysoká zátěž)	Konc. 2 min.
Candida albicans (EN 13624, EN 16615, VAH, vysoká zátěž)	Konc. 1 min.
Inaktivace tuberkulózních bakterií (M. terrae, EN 14348, vysoká zátěž)	Konc. 1 min.
Obalené viry (např. HBV, HIV, HCV, koronaviry) dle EN 14476 a DVV/2012 v testu na povrchu, vysoká zátěž	Konc. 1 min.
Omezeně virucidní PLUS (adenoviry, noroviry a rotaviry, vysoká zátěž)	Konc. 1 min.
Bakterie a Candida albicans, zařazené v seznamu VAH (s mechanickým působením)	Konc. 5 min.

Pro potravinářství, průmysl, domácnosti a veřejné instituce

Bakterie a Candida albicans dle EN 1276, EN 13697 a EN 1650 (vysoká zátěž)	Konc. 1 min.
--	--------------

CE 0124

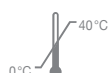

PRISMAN GmbH, Otto-Hahn-Ring 6-18
D-64653 Lorsch, Tel.: +49(0)6251/866980-0



multi-com GmbH
Hagener Allee 3
22926 Ahrensburg
Německo

Telefon
DE: +49(0)4102 80 79 0
AT: +43(0)1 20 55 55

Web
multi-com.de
multi-com24.at



více informací

Chemicko-fyzikální údaje

Hustota: 0,911 g/ml

pH: 6,0–10,0

Účinné látky

100 g obsahuje 43,0 g ethanolu, 8,0 g propan-1-olu, 0,055 g didecyldimethylamonium-chloridu. Složení dle nařízení (ES) č. 648/2004: obsahuje parfémové složky.

Popis produktu

Alkoholový roztok k přímému použití pro rychlou dezinfekci a čištění zdravotnického vybavení, ploch v blízkosti pacientů a hygienicky rizikových prostor. UFI: 1AFC-JN7C-H10P-K0H8

Pokyny k použití

Dezinfekce zdravotnických prostředků: Pro dezinfekci otěrem důkladně navlhčete dezinfekčním roztokem utěrku testovanou podle EN 16615 (např. FAVORIT Easy Wipes) a otřete povrchy, případně naneste roztok přímo na povrch a následně jej otřete uvedenou utěrkou. Dezinfekce povrchů: Pro dezinfekci otěrem důkladně navlhčete vhodnou utěrku dezinfekčním roztokem a otřete povrchy, případně naneste roztok přímo na povrch a následně jej otřete. Všechny dezinfikované plochy musí být zcela vlhké a smáčené. Přípravek nechte působit po uvedené dobu. Vhodný také k napouštění kompatibilních rolí utěrek testovaných s tímto přípravkem pro dezinfekci otěrem. Při tomto použití dodržujte požadované množství roztoku k napuštění daného materiálu utěrek. Vhodný pro zdravotnictví (lékařské a stomatologické ordinace, kliniky, domovy pro seniory, ošetřovatelské a záchranné služby), potravinářství, průmysl, domácnosti a veřejné instituce. Pouze pro zdravotnické prostředky odolné vůči alkoholu, např. lékařské teploměry nebo tonometry (není vhodný např. pro akrylátové sklo).

Dávkovací pomůcky

Klíč na kanystry, výpustný kohout na kanystry, pumpa na kanystry, rozprašovací láhev o objemu 1 litr.

Informace a označení

Viz etiketa a doplňující informace.



Varování

Doba použitelnosti

42 měsíců od data výroby

Skladování

Skladujte v suchu, chraňte před teplem, přímým slunečním zářením a vlhkostí. Skladovací teplota: 0–40 °C.

Odborné posudky

Naše produkty jsou vědecky zkoumány a testovány nejnovějšími metodami. Na vyžádání vám rádi zašleme odborné posudky.

Bezpečnostní pokyny

H226 Hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/národních/mezinárodních předpisů. Hořlavý! Nestříkejte do otevřeného ohně! Bod vzplanutí dle DIN 51755: přibližně 25 °C. Aplikujte nejvýše 50 ml na m². Celkové množství aplikované v jedné místnosti nesmí překročit 100 ml na m² podlahové plochy místnosti.

Pokyny k likvidaci

Obal odevzdejte k recyklaci pouze zcela vyprázdněný. Zbytky přípravku likvidujte pod kódem odpadu EAK 07 06 99.

Hlášení závažných nežádoucích příhod

Veškeré závažné nežádoucí příhody, k nimž došlo v souvislosti s produktem, musí uživatel/pacient oznámit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel/pacient usazen.

Používejte dezinfekční prostředky bezpečně.

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.



Další informace, dezinfekční plány a dávkovací tabulky ke stažení snadno a pohodlně přímo na multi-com.de