multi-com

FAVORIT

VAH v seznamu

Wet Wipes Select+

Alkoholové dezinfekční ubrousky

Varianta	Jednotkové balení	Přepravní balení	REF
neutrální	Sáček 240 ubrousků, 23 × 15 cm	3 sáčky	REF 30011
květinová	Sáček 240 ubrousků, 23 × 15 cm	3 sáčky	REF 30012
meloun	Sáček 240 ubrousků, 23 × 15 cm	3 sáčky	REF 30013
grapefruit	Sáček 240 ubrousků, 23 × 15 cm	3 sáčky	REF 30014
aloha	Sáček 240 ubrousků, 23 × 15 cm	3 sáčky	REF 30015



- Ubrousky z netkané textilie k přímé dezinfekci a čištění
- Omezeně virucidní PLUS: účinné proti obaleným a neobaleným virům
- Účinné proti norovirům
- Impregnace: FAVORIT Sprüh- und Wischdesinfektion PLUS
- Bez aldehydů, fenolů a peroxidů

Ověřená, spolehlivá účinnost
Zařazeno v seznamu VAH, široké spektrum účinku včetně bakterií, virů, hub a původců TBC.

Šetrnost k lidem i materiálům
Bezpečné kombinace účinných látek, velmi dobrá materiálová snášenlivost.

Účinně a rychle
Krátké doby působení, zasychá téměř beze zbytků.

Plochy

Použití

Podle MPG: Alkoholové vlhčené ubrousky připravené k použití pro preventivní dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků odolných vůči alkoholu. Nejsou vhodné pro závěrečnou (terminální) dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.
Podle nařízení o biocidech: Alkoholové vlhčené ubrousky připravené k použití pro dezinfekci a čištění menších ploch odolných vůči alkoholu.

Spektrum účinnosti

Baktericidní (včetně MRSA), levurocidní, tuberkulocidní a mykobaktericidní účinnost. „Omezeně virucidní“ (účinné proti obaleným virům, např. HBV, HIV, HCV, viru vakcinie, chřipkovým virům a koronavirům). „Omezeně virucidní PLUS“ (účinné proti norovirům, rotavirům a adenovirům).

Vyrobeno v Německu: odpovědná a udržitelná výroba.

Doby působení

Doby působení napuštěných ubrousků	
Bakterie a Candida albicans podle EN 16615 a VAH při vysoké organické zátěži	**2 min.**
Doby působení impregnačního roztoku	
Bakterie (EN 13727, vysoká organická zátěž)	Neřed. 1 min.
Candida albicans (EN 13624, vysoká organická zátěž)	Neřed. 1 min.
Inaktivace mykobakterií tuberkulózy (M. terrae, EN 14348, vysoká organická zátěž)	Neřed. 1 min.
Obalené viry (např. HBV, HIV, HCV) dle EN 14476 a DVV/2012, povrchový test, vysoká organická zátěž	Neřed. 1 min.
Omezeně virucidní PLUS (adenoviry, noroviry a rotaviry, vysoká organická zátěž)	Neřed. 1 min.

CE 0124 MD 0 °C 40 °C

PRISMAN GmbH, Otto-Hahn-Ring 6-18
D-64653 Lorsch, Tel.: +49 (0) 6251 / 86 69 80 - 0

multi-com GmbH
Hagener Allee 3
22926 Ahrensburg
Německo

Telefon
DE:+49(0)4102 80 79 0
AT: +43(0)1 20 55 55

Web
multi-com.de
multi-com24.at

PREMIUM QUALITY · MADE IN GERMANY ·

Více informací

2025-10 FWW-04-170366 (Rev. 05)

FAVORIT Wet Wipes Select+

Alkoholové dezinfekční ubrousky

Vlastnosti výrobku

Barva	bílé, hladké
Rozměry	23 x 15 cm
Počet útržků	240 útržků
Plošná hmotnost	50 g/m²
Vlákna	100 % polyester
Impregnační roztok	FAVORIT Sprüh- und Wischdesinfektion PLUS

Účinné látky

43,0 g ethanolu; 8,0 g propan-1-olu; 0,055 g didecyldimethylamonium-chloridu. Složení podle nařízení (ES) č. 648/2004 (impregnační roztok): obsahuje parfemační látky.

Pokyny k použití

Odlepte etiketu Stick & Lift ze sáčku a nalepte ji na dávkovací nádobu. Do příslušného pole zaznamenejte datum otevření a datum konce použitelnosti. Sáček nahoře otevřete a vložte do dávkovací nádoby. Vytáhněte první ubrousek z role a provlékněte jej hvězdicovým otvorem ve víku. Víko pevně přitlačte k nádobě a těsně uzavřete. Dezinfikované plochy důkladně otřete a nechte přípravek působit. Všechny dezinfikované plochy musí být zcela smáčené. Nádobu vždy uzavírejte. Po otevření sáčku lze ubrousky v dávkovací nádobě používat 28 dní. Dávkovací nádobu čistěte a dezinfikujte vhodným dezinfekčním ubrouskem podle vedle uvedených pokynů. Používejte pouze na materiály odolné vůči alkoholu (nevhodné pro akrylátové sklo). Vhodné pro zdravotnictví (lékařské a stomatologické ordinace, kliniky, domovy pro seniory, pečovatelské a záchranné služby), potravinářství, průmysl, domácnosti a veřejná zařízení. UFI: 1AFC-JN7C-H10P-K0H8

Informace a označení

Viz etiketa a doplňující informace.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti neotevřeného balení: 42 měsíců od data výroby. Doba použitelnosti po otevření: 28 dní. Po otevření sáčku je použitelnost ubrousků v dávkovači FAVORIT omezena na 28 dní. Poté je nutné zbylý obsah zlikvidovat podle místních, regionálních, vnitrostátních a mezinárodních předpisů. Před opětovným naplněním dávkovač vyčistěte a dezinfikujte.

Skladování

Skladujte v suchu, chraňte před teplem, přímým slunečním zářením a vlhkostí. Skladovací teplota: 0-40 °C.

Klasifikace

Ubrousky jsou registrovány jako biocidní přípravek u BAuA (Spolkový ústav pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) podle nařízení o biocidech: reg. č. BAuA N-74939. Splňuje nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích. Zdravotnický prostředek třídy IIa.

Bezpečnostní pokyny

H 228 Hořlavá tuhá látka. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. Uchovávejte v uzavřeném obalu. Veškeré závažné nežádoucí příhody, ke kterým došlo v souvislosti s výrobkem, musí uživatel/pacient hlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel/pacient usazen.

Pokyny k likvidaci

Do tříděného odpadu odevzdávejte pouze zcela vyprázdněný obal. Zbytky obsahu likvidujte pod kódem Evropského katalogu odpadů (EAK) 07 06 99.

Hlášení závažných nežádoucích příhod

Veškeré závažné nežádoucí příhody, ke kterým došlo v souvislosti s výrobkem, musí uživatel/pacient hlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel/pacient usazen.

Dezinfekční přípravky používejte opatrně.
Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.



Nebezpečí

Další informace, dezinfekční plány a dávkovací tabulky ke stažení naleznete snadno a pohodlně přímo na multi-com.de


Bezpečné používání dezinfekčních ubrousků




Při použití noste vhodné ochranné rukavice (např. z nitrilového kaučuku).



Vytáhněte ubrousek otvorem ve víku. Poté víko vždy pečlivě a těsně uzavřete.

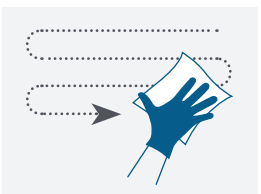

Dezinfikované plochy důkladně otřete a nechte roztok působit po stanovenou dobu.

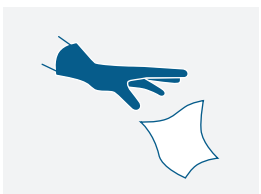

Vyschlé nebo znečištěné ubrousky vyhoďte a nahraďte čerstvými.